

QL2028 I (2019 款)

牙科综合治疗机 / DENTAL UNIT

轻巧，灵动

Smooth and Streamlined





功能介绍 / FEATURES



功能性的控制面板

观片灯内置设计，吐痰联动椅位快捷键，口腔灯快捷键，观片灯快捷键，术后复位快捷键，急救 -5° 椅位

Full function control panel

X-ray film viewer built in design, with spitting position setting, operation light control, x-ray film viewer control, zero position control, Emergency position(-5°)control

- ① 设置 /Setting
- ② 冲痰 /Cuspidor flush
- ③ 供水 /Cup filling
- ④ 加热 /Water heating
- ⑤ 术后复位 /Zero position
- ⑥ 急救 -5° 椅位 /Emergency position(-5°)
- ⑦ 吐痰联动 /Spitting position
- ⑧ 口腔灯 /Operation light
- ⑨ 观片灯 /X-ray film viewer



转动机箱
Rotary side box

旋转灵活，增大助手位的活动空间，便于副手操作。

Easy to move, more space for the assistant, make the assistant operation easier.



旋转手机挂架
Rotary handpiece holder

手机挂架可旋转、提供便捷操作角度、间接避免手机与人体接触。

Rotary handpiece holder can provide convenient angle for operation and avoid direct contact between dentist and handpiece.



感应 LED 柔和双色灯
LED sensor light with yellow and white light mix

黄光、白光、柔和混合光三种光源模式自由切换，光斑柔和清晰均匀，感应手动两用开关，亮度强至弱可调节，手柄可拆卸，光源分为两组黄光以及四组白光。


More tender light: 6 light source with 4 white and 2 yellow; Easily switch to yellow light mode, white light mode and mix light mode; Super clear light spot, brightness adjustable from strong to weak; Detachable and sterilizable handle.



高档旋转式玻璃痰盂（陶瓷痰盂可选配）
Rotary glass cuspidor

玻璃痰盂质感强，易拆卸，清洗方便，吐痰舒适，独特的水流疏导设计，有效防止水流飞溅。

Rotary and detachable spittoon, easy to clean.

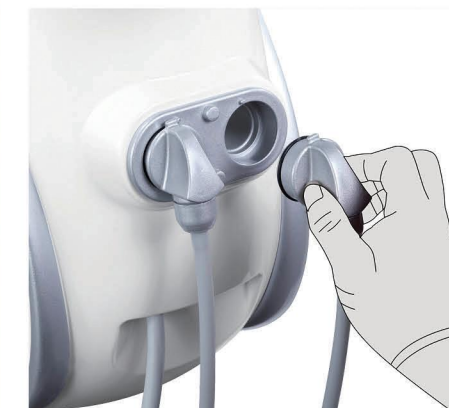

外置可拆卸式吸唾过滤器
Built out and detachable suction filter

快速拆装，易于清洁，安装高质量强弱吸管。

Easy to clean with good quality strong and weak suction tube.



可调节头枕
Additional children headrest

多角度可调整头枕，单手即可快速调整位置，曲面设计，提供舒适颈部支撑。

Multi-angle adjustable headrest, can quickly adjust position with one hand, surface design can provide comfortable neck support.

种植手术口腔灯

LED light

- 全封闭设计，配轻松拆卸的高温消毒的把手套，可清洁和消毒；
- 该灯具有可调色温（4000–5500K，7 档），高亮度（可达 60000LUX），无影效果好；光斑方正（85*160）
- 是一款既可以用于种植手术照明又可以兼顾其他口腔手术照明多用途口腔灯。
- Totally enclosed design and hygienic autoclavable handle covers which is easily taken out or put in
- 7color temperatures to be chosen(4000K to 5500K) and high illumination up to 60000Lux.
- The light is also an excellent choice for the ENT and cosmetic surgery.
- (rectangle pattern,high illumination, superb shadow less effect)



医生椅 / DOCTOR CHAIR



脚踏

MULTIFUNCTIONAL FOOT PEDAL

全新设计多功能脚踏
Multi function foot pedal with latest design

独特的金属支架，重新定义万向开关，根据人体工程学设计，使用更舒适，具有椅位冲痰供水控制功能。
Unique metal handle, with chair position control, with bowl rinsing and cup filling control.



可选配置

OPTIONS



选配部件 / OPTIONS




无缝座垫 / PU LEATHER



超细纤维皮座垫 / MICROFIBER LEATHER



安装示意图 / INSTALLATION DIAGRAM

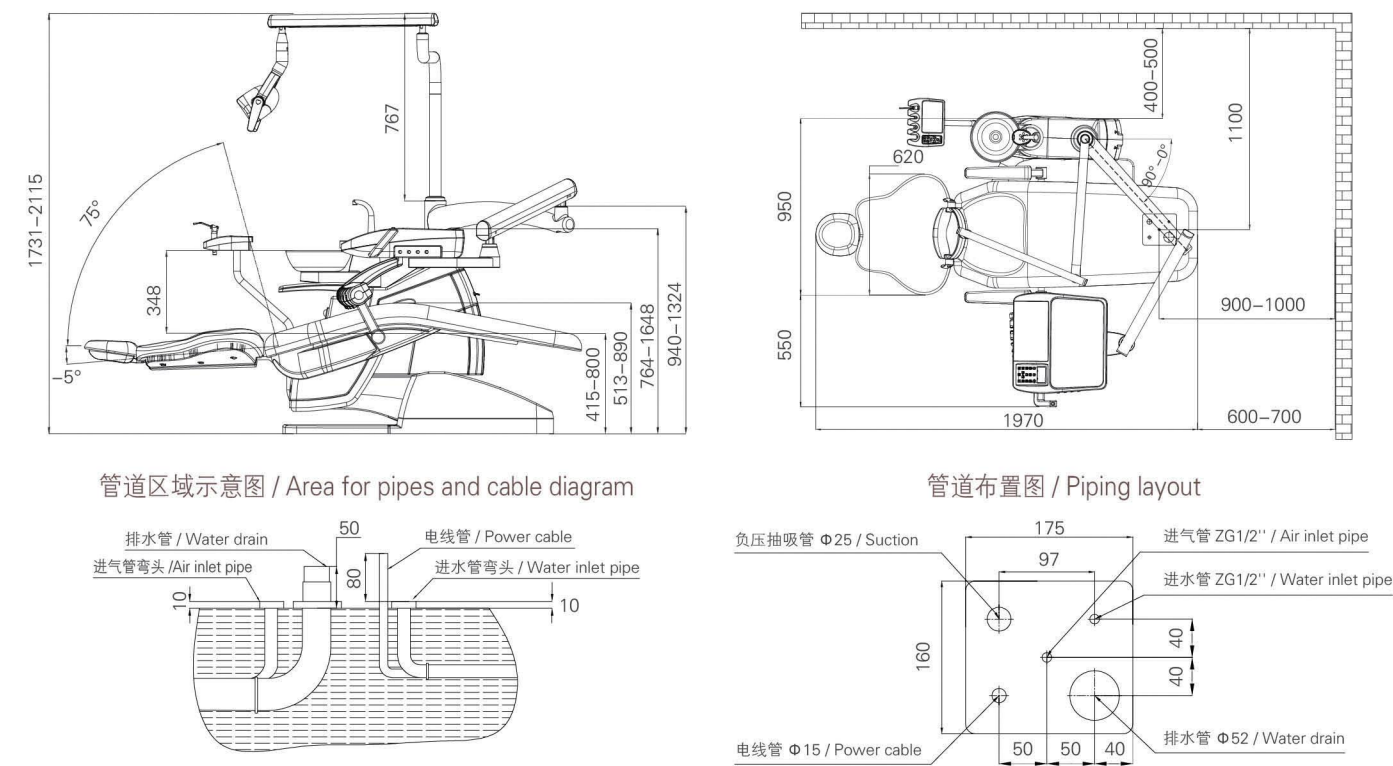

牙椅配置表 / CONFIGURATION OF DENTAL UNIT

类 目 Classification	配 置	Configuration	型号 Model				
			QL2028 IV	QL2028 III	QL2028 II	QL2028 I	QL2028
治疗椅 Patient Chair	豪华的超纤皮座垫	Handmade sewed ultra-fiber leather upholstery	★	☆	☆	☆	☆
	无缝 PU 皮座垫	Seamless PU cushion	☆	★	★	★	★
	联动椅位补偿功能	Synchronized chair design	★	★	★	☆	☆
	机椅互锁系统	Chair interlock system	★	★	★	☆	☆
	水气电一键开关装置	Water-air-electricity with one on/off switch control	★	★	☆	☆	☆
	椅位记忆功能（9 组）	Chair position memory (9 sets)	★	★	☆	☆	☆
	吐痰复位	Spitting chair position	★	★	★	★	★
	急救椅位	Emergency chair position	☆	☆	★	★	★
	豪华型多功能脚踏	Luxury multi-function foot pedal	★	★	★	★	★
口腔灯 Operation Light	豪华型 LED 冷光灯	Luxury LED operation light	★	★	★	★	★
器械盘 Operation tray	上挂式	Top-mounted tray	★	☆	☆	☆	☆
	下挂式	Hanging hose tray	☆	★	★	★	★
	十六键多功能控制面板	Full function control panel with 16 buttons	★	★	☆	☆	☆
	十三键多功能控制面板	Full function control panel with 13 buttons	☆	☆	★	★	★
	外置观片灯	X-ray film viewer	★	★	☆	☆	☆
	内置观片灯	Built-in x-ray film viewer	☆	☆	★	★	★
	三用枪（冷）	3-way syringe (cold)	★	★	★	★	★
主机箱 Main side box	可旋转拆卸玻璃痰盂	Rotary glass cuspidor	★	★	★	★	☆
	强吸和弱吸	Saliva ejector with high and low suction	★	★	★	★	★
	自动冲痰供水恒温控制系统	Automatic cuspidor flush & water supply with costant temperature	★	★	★	★	★
	纯净水供应系统	Purified water supply system	★	★	★	★	★
副控台 Assistant control	八键多功能操作面板	Multi-function control panel with 8 buttons	★	★	★	★	★
	三用枪（热）	3-way syringe (heat)	★	★	★	★	★
	可调节强吸接头	Adjustable strong suction	★	★	★	☆	☆
地箱 Floor box	内置型	Built-in type (without floor box)	★	★	★	☆	☆
	外置型	Built-out type (with floor)	☆	☆	☆	★	★
医生座椅 Doctor's stool	豪华型	Luxury type	A5	A5	☆	☆	☆
	标准型	Standard type	☆	☆	A4	A3	A3
选配部件 Options	高速手机	High speed handpiece	▲	▲	▲	▲	▲
	低速手机	Low speed handpiece	▲	▲	▲	▲	▲
	内窥镜系统	Camera system	▲	▲	▲	▲	▲
	超声波洁牙机	Ultrasonic scaler	▲	▲	▲	▲	▲
	LED 光固化机	Led curing light	▲	▲	▲	▲	▲
	医用空气压缩机	Air compressor	▲	▲	▲	▲	▲
	抽吸机	Suction unit	▲	▲	▲	▲	▲
	上挂式工具盘	Top-mounted tray	▲	▲	▲	▲	▲
	托盘水杯筒纸巾盒	Plate, cup cylinder, tissue box	▲	▲	▲	▲	▲
	豪华超纤皮座垫	Handmade sewed ultra-fiber leather upholstery	▲	▲	▲	▲	▲
	进口电磁阀	Imported magnetic valves	▲	▲	▲	▲	▲
	台湾堤摩讯电机	Taiwan Timotion motor	▲	▲	▲	▲	▲

备注 NOTE: ★ 标准配置 Equipped / ☆ 无此配置 None / ▲ 选配部件 Options